

BESTELINFORMATIE:

▶ OVAL

BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	11 x 13 mm, dikte 2 mm	REF SP2112
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	11 x 13 mm, dikte 3 mm	REF SP2113
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	13 x 17 mm, dikte 2 mm	REF SP2132
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	13 x 17 mm, dikte 3 mm	REF SP2133
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	15 x 21 mm, dikte 2 mm	REF SP2152
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL OVAL	15 x 21 mm, dikte 3 mm	REF SP2153

▶ ROUND

BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 5 mm, dikte 2 mm	REF SP1052
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 5 mm, dikte 3 mm	REF SP1053
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 7 mm, dikte 2 mm	REF SP1072
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 7 mm, dikte 3 mm	REF SP1073
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 10 mm, dikte 2 mm	REF SP1102
BLOM SINGER® NASAL SEPTAL ROUND	Ø 10 mm, dikte 3 mm	REF SP1103

FAHL

BLOM-SINGER®

NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS



MAGNETISCHE NEUSSEPTUMPROTHESE

VOOR INDIVIDUELE AANPASSING

FAHL

Andreas Fahl
Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Str. 4a
51149 Keulen - Duitsland
Phone +49 (0) 22 03/29 80-0
Fax +49 (0) 22 03/29 80-100
mail info@fahl.de
www.fahl.de

Filiaal Berlijn
Am Borsigturm 62
13507 Berlijn - Duitsland
Phone +49 (0) 30/43 73 139-0
Fax +49 (0) 30/43 73 139-35

Filiaal Berlijn
Aurbacher Straße 2
81541 München - Duitsland
Phone +49 (0) 89/58 90 90 9-0
Fax +49 (0) 89/58 90 90 9-20


Filiaal Oostenrijk
Triester Straße 14 / office building 2
2351 Wiener Neudorf - Oostenrijk
Phone +43 (0) 22 36/89 28 38-0
Fax +43 (0) 22 36/89 28 38-14

Filiaal Zwitserland
Cherstrasse 4
8152 Glattbrugg - Zwitserland
Phone +41 (0) 448293060
Fax +41 (0) 448293061

* Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH is exclusief verkooppartner voor Blom-Singer® producten in een aantal landen in Europa.
Meer informatie hierover vindt u op onze homepage www.fahl.de.

BLOM-SINGER® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS

Een defect aan het neustussenschot (septumperforatie) kan verschillende oorzaken hebben. Hoewel sommige patiënten ondanks een septumperforatie symptoomvrij zijn, veroorzaakt dit bij anderen bijv. frequente neusbloedingen, fluitende geluiden bij neusademhaling en een droge neus met de vorming van korsten en afzettingen. De Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS werd ontwikkeld om de levenskwaliteit van deze patiënten te verbeteren.

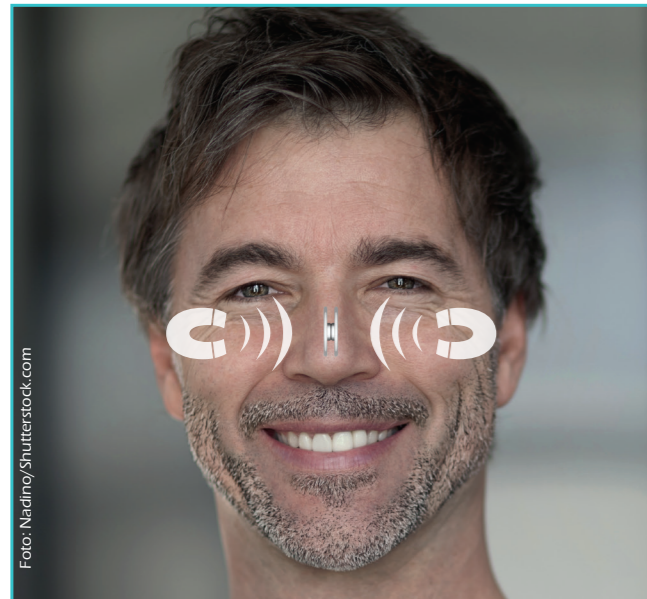

Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS

De magnetische neusseptumprothese bestaat uit 2 componenten met elk een dubbele flens. De neodymiummagneten bieden een sterke, betrouwbare grip en zijn veilig afgedekt met nauwkeurig gevormde medische silicone. Doordat beide flenzen dezelfde vorm en diameter hebben, wordt de beweeglijkheid van de prothese geminimaliseerd en een optimale aanpassing aan de neusseptumperforatie bereikt.

Zo zorgt de Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS voor een aangenaam draagcomfort en vermindert zij de ophoping van afscheidingsresten en bloedingen.

EENVOUDIG TE PLAATSEN

Studies hebben aangetoond dat patiënten die een tweedelige magnetische neusseptumprothese gebruiken, geen ongemak ondervinden bij het gebruik, vervangen of verwijderen van het product. Bovendien meldden de onderzoekspersonen een exacte en strakke pasvorm van de prothese.¹ Voor het inbrengen van de zeer zachte prothese is een niet-magnetisch instrument, zoals een pincet of vasculaire klem, vereist. Indicatie voor een Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS wordt gevormd door een niet-chirurgische afsluiting van neusseptumperforaties in een ziekenhuisomgeving of artspraktijk. Een vaak complexe en dure aanpassing van de epthesis kan zo worden vermeden, evenals chirurgische bijwerkingen.

AANGENAME PASVORM

De comfortabele pasvorm van de prothese voorkomt een onaangenaam gevoel ten gevolge van een vreemd element bij de patiënt. Bij veranderingen van de grootte of vorm van het septumdefect is op termijn een wijziging van de grootte van de Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS eventueel nodig en zonder problemen mogelijk.


ONGECOMPLICEERDE REINIGING

Het reinigen van de neustusseptumprothese is zowel in situ als buiten het lichaam vakkundig mogelijk. De verwijderde prothese wordt na medische controle met water en milde zeep gereinigd. Een in-situ Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS kan met een met 0,9 %-zoutoplossing bevochtigd wattenstaafje rond en naast de flens vakkundig worden gereinigd.

BLOM-SINGER® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS

INDIVIDUELE AANPASSING

De Blom-Singer® NASAL SEPTAL PERFORATION PROSTHESIS is verkrijgbaar in verschillende ronde en ovale vormen, maten en diktes om ervoor te zorgen dat de prothese op de best mogelijke wijze, individueel aangepast en eenvoudig kan worden geplaatst. Door de ideale pasvorm wordt de beweeglijkheid van de prothese geminimaliseerd en worden hierdoor bloedingen en korstvorming in de omgeving van het defect voorkomen. Bovendien is individueel op maat snijden van de flens mogelijk.

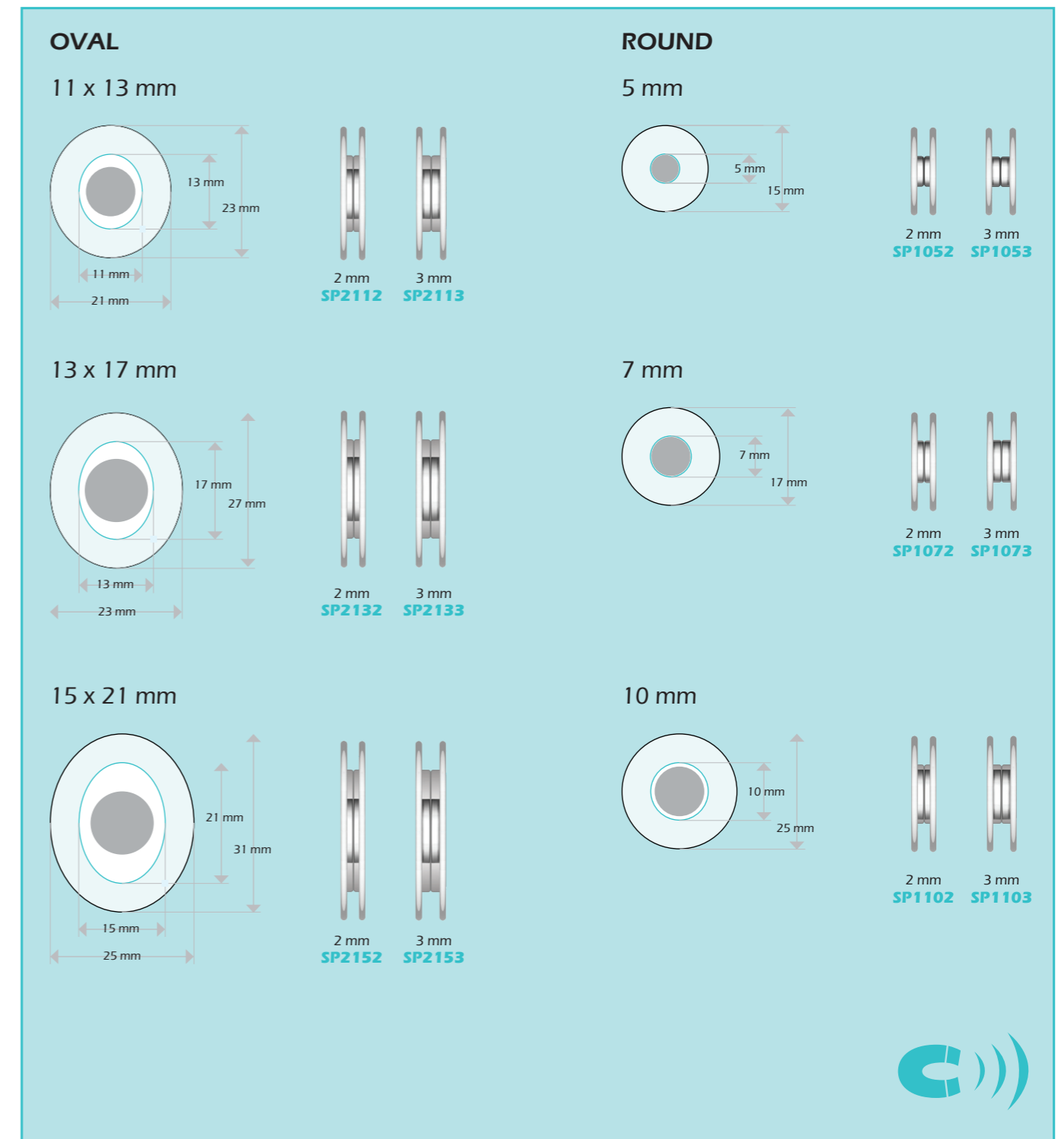

Afbeeldingen op ware grootte