


# TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric

REF 68000



REF 60700 (optional)

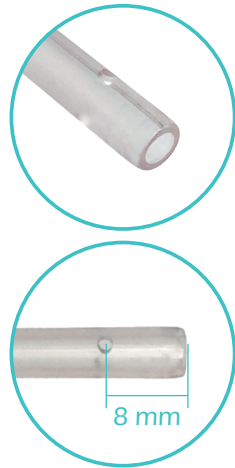

- ▶ Sterile Tracheostoma-Katheter zum Absaugen von Trachealsekret
- ▶ Aus weichem, flexiblem und transparentem Kunststoff
- ▶ Mit zentraler Öffnung und vier seitlichen Öffnungen („Augen“) an der Katheterspitze, um das Festsaugen des Katheters an der Trachealwand während des Absaugvorganges zu verhindern
- ▶ Eine Graduierung in 1 cm-Abständen erlaubt die direkte Kontrolle der Einführtiefe des Absaugkatheters
- ▶ Großes Sortiment (CH 6-18)
- ▶ Farbkodierte Konnektoren
- ▶ Zwei verschiedene Längenvarianten verfügbar: 25 cm und 50 cm (die kurze Variante ist besonders geeignet für das tracheale Absaugen)
- ▶ In Verbindung mit dem TRACHFLOW® Fingertip einzusetzen, um die Absaugstärke zu kontrollieren. Mit dem Fingertip wird der Absaugschlauch des Absauggerätes mit dem sterilen Stomakatheter verbunden. Durch die konische Konstruktion passt der TRACHFLOW® Fingertip auf alle Größen der Stomakatheter.

## LIEFERUMFANG

**TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric S** REF 68100

1 x Absaugkatheter, steril

oder  
**TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric L** REF 68000

1 x Absaugkatheter, steril

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe hinter der Artikelnummer an!

Optional erhältlich:  
**TRACHFLOW® FINGERTIP** REF 60700  
(unsteril)

### INFORMATION

6 8 10 12 14 16 18

CE 0044 STERILE EO (gilt nicht für REF 60700)

Produkt	Größe	Länge	Shore	VE	REF
TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 06-18	25 cm	A70	30	<b>68100-xx</b>
TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 06-18	50 cm	A70	30	<b>68000-xx</b>