


TRACHEOSTOMA CATHETER METRIC S + L

steril

REF 68000/68900

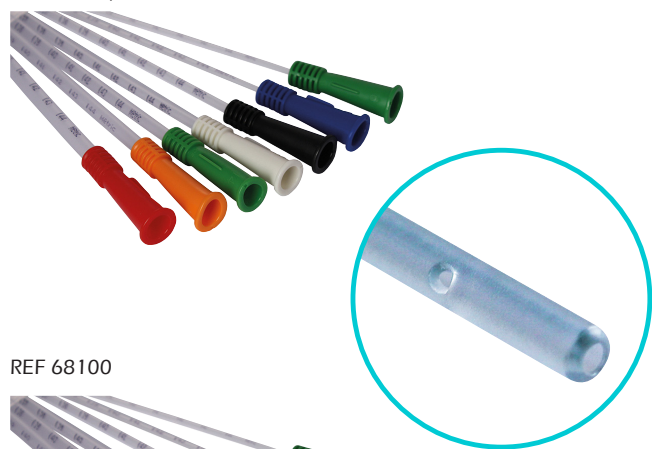

REF 68100



REF 60700



- ▶ Sterile Tracheostoma-Katheter zum Absaugen von Trachealsekret
- ▶ Aus weichem, flexiblem und transparentem Kunststoff
- ▶ Mit zentraler Öffnung und vier seitlichen Öffnungen („Augen“) an der Katheterspitze, um das Festsaugen des Katheters an der Trachealwand während des Absaugvorganges zu verhindern
- ▶ Eine Graduierung in 1 cm-Abständen erlaubt die direkte Kontrolle der Einführtiefe des Absaugkatheters
- ▶ Großes Sortiment (CH 6-18)
- ▶ Farbkodierte Konnektoren
- ▶ Zwei verschiedene Längenvarianten verfügbar: 25 cm und 50 cm (die kurze Variante ist besonders geeignet für das tracheale Absaugen)
- ▶ In Verbindung mit dem TRACHFLOW® Fingertip einzusetzen, um die Absaugstärke zu kontrollieren. Mit dem Fingertip wird der Absaugschlauch des Absauggerätes mit dem sterilen Stomakatheter verbunden. Durch die konische Konstruktion passt der TRACHFLOW® Fingertip auf alle Größen der Stomakatheter.

LIEFERUMFANG

▶ Gebrauchsanweisung

TRACHEOSTOMA CATHETER METRIC S	REF 68100
1 x Absaugkatheter, steril	
oder	
STOMA CATHETER METRIC L	REF 68000
1 x Absaugkatheter, steril	
oder	
ABSAUGKATHETER STANDARD METRIC L	REF 68900
1 x Absaugkatheter, steril	

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe hinter der Artikelnummer an!

Optionales Zubehör:	
TRACHFLOW® FINGERTIP	REF 60700

INFORMATION

06 08 10 12 14 16 18

CE 0482 STERILE EO

Produkt	Größe	Länge	Shore	VE	REF
TRACHEOSTOMA CATHETER METRIC S	CH 08-16	25 cm	A64	30	68100-xx
STOMA CATHETER METRIC L	CH 06-18	50 cm	A64	30	68000-xx
ABSAUGKATHETER STANDARD METRIC L	CH 06-18	50 cm	A78	100	68900-xx