


► Fünf verschiedene Typen von gefensterten Innenkanülen für DURATWIX® Tracheostomiekanülen, jede in zwei Längen erhältlich:

1. Mit integriertem Silikonsprechventil, um ein Abfallen des Sprechventils zu vermeiden (PHON ICF). Eine Hustenkappe dient dem Ausleiten von Überdruck beim Husten (REF 19841 und REF 19842 short)
2. Mit 15 mm Drehkonnektor (ICFV), um Zug- und Scherkräfte abzupuffern, wie sie durch Beatmungsschläuche entstehen können (REF 19871 und REF 19872 short)
3. Mit feststehenden 15 mm Konnektor (ICFU) zur Verbindung mit einem HME oder einem Sprechventil (REF 19861 und REF 19862 short)
4. Mit Flachprofil (ICF) wenn kein Anschluss an Beatmungsgeräte, HME oder Sprechventil benötigt wird (REF 19851 und REF 19852 kurz)
5. Mit 22 mm Adapter (ICFK), um Sprechventile oder HMEs mit flacher Basis (22mm Adapter) anzuschließen (REF 19881 und REF 19882 short)

► Zweifach farbkodiert:

Die Konnektoren und die Konnektorbasis sind türkisblau (weiß bei ungefensterten Innenkanülen) Kanülenrohr der Standardlänge: weiß; kurze Variante: türkisblau

► Die Größe muss entsprechend der DURATWIX® Außenkanüle gewählt werden.

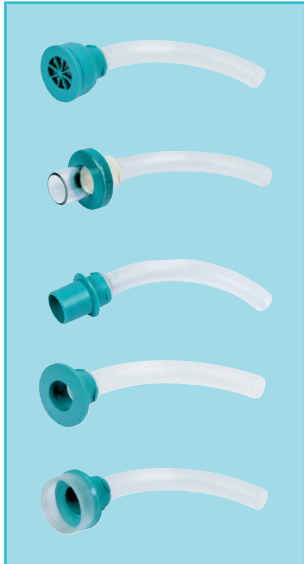

## Bestellhinweis:

**DURATWIX® PHON ICF**, Größe 7-10, Packung mit 2 Stück

**DURATWIX® PHON ICF short**, Größe 7-10, Packung mit 2 Stück

**DURATWIX® ICFV**, Größe 6-10, Packung mit 3 Stück

**DURATWIX® ICFV short**, Größe 6-10, Packung mit 3 Stück

**DURATWIX® ICFU**, Größe 6-10, Packung mit 3 Stück

**DURATWIX® ICFU short**, Größe 6-10, Packung mit 3 Stück

**DURATWIX® ICF**, Größe 7-10, Packung mit 3 Stück

**DURATWIX® ICF short**, Größe 7-10, Packung mit 3 Stück

**DURATWIX® ICFK**, Größe 7-10, Packung mit 3 Stück

**DURATWIX® ICFK short**, Größe 7-10, Packung mit 3 Stück

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

		<b>REF 19841</b>
		<b>REF 19842</b>
		<b>REF 19871</b>
		<b>REF 19872</b>
		<b>REF 19861</b>
		<b>REF 19862</b>
		<b>REF 19851</b>
		<b>REF 19852</b>
		<b>REF 19881</b>
		<b>REF 19882</b>

STERILE EO Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

**Rx only** ACHTUNG: Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

CE 0482 CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany