

LARYVOX® HME

REF 49800



CE

REF 49801




CE 0482

REF 49802



CE 0482

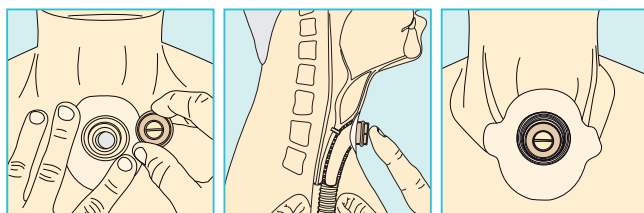

- ▶ PU-schuimstof met grote poriën
- ▶ Neutrale beige kleur voor een onopvallend uiterlijk
- ▶ Gering gewicht, vlak profiel
- ▶ Stabiele behuizing – kan zonder druk worden afgesloten door de vinger erop te leggen, om voor patiënten met een laryngectomie met stemprothese het spreken mogelijk te maken
- ▶ Met multi-adapter voor het aansluiten van 15 mm connectoren (**UNI**) en 22 mm combinatieadapters (**KOMBI**), waarmee aansluiting mogelijk is op alle conventionele basisplaten (bijv. **LARYVOX® TAPE**) of siliconen canules voor gelaryngectomeerde patiënten (bijv. **LARYNGOTEC®**).
- ▶ Verkrijgbaar in drie varianten:
 - **REF 49800**: HME filter
 - **REF 49801**: O₂-connector
 - **REF 49802**: HME filter met zuurstofaansluiting

LEVEROMVANG**LARYVOX® HME** **REF 49800**6 x 5 Filtercassette, individueel verpakt
1 x Gebruiksaanwijzing

of

LARYVOX® O₂ Connect **REF 49801**5 x O₂-connector, individueel verpakt
1 x Gebruiksaanwijzing

of

LARYVOX® O₂ HME **REF 49802**6 x 5 Filtercassette, individueel verpakt
1 x Gebruiksaanwijzing