


SENSOTRACH®


REF 30520




REF 30609

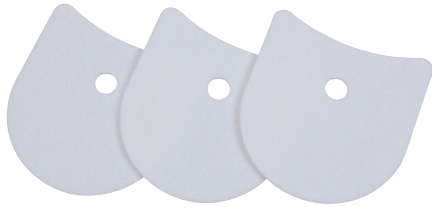

REF 30662

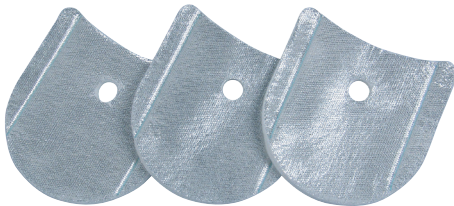

REF 30780

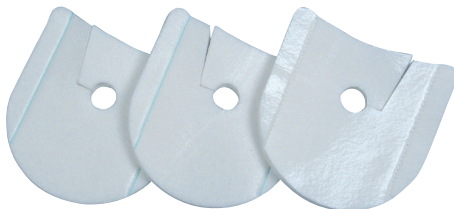

- ▶ Compresses trachéales de haute qualité avec un arrondi ajusté à l'anatomie pour un confort de port optimal
- ▶ Les versions **UNO** sont à couche simple et conviennent aux patients affichant de faibles sécrétions
- ▶ Les versions **DUO** affichent deux couches et s'adressent aux patients présentant une quantité de sécrétions modérée à faible: la couche appliquée sur la peau, marquée d'une bande verte, absorbe les sécrétions de manière efficace et les acheminent vers l'extérieur dans la couche périphérique. La peau reste ainsi sèche et chaude.
- ▶ Les versions **3-PLUS** se composent de trois couches et conviennent aux patients affichant des sécrétions normales à importantes: la couche appliquée sur la peau absorbe les sécrétions de manière efficace et les acheminent vers l'extérieur passant par les couches centrale et périphérique. La peau reste ainsi sèche et chaude. La couche externe se caractérise par un revêtement anti-humidité afin de protéger les vêtements
- ▶ La compresse **DUO ALU** est une compresse trachéale de haute qualité, particulièrement absorbante et robuste dont un côté affiche un revêtement aluminisé. Le revêtement de couleur métallique prévient toute adhérence du sang et de résidus de sécrétions sur la peau.
- ▶ Variantes standard sans fente
- ▶ La version **SLIT** avec fente pour un remplacement avec une canule encore insérée

CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

SENSOTRACH® UNO REF 305xx
10 x compresses trachéales

ou
SENSOTRACH® DUO REF 3060x
10 x compresses trachéales

ou
SENSOTRACH® DUO ALU REF 3066x
10 x compresses trachéales

ou
SENSOTRACH® 3-PLUS REF 307xx
10 x compresses trachéales

Produit	Taille	Unité	REF
SENSOTRACH® UNO	9,0 x 9,8 cm	10	30520
SENSOTRACH® UNO SLIT	9,0 x 9,8 cm	10	30521
SENSOTRACH® DUO	9,0 x 9,8 cm	10	30608
SENSOTRACH® DUO SLIT	9,0 x 9,8 cm	10	30609
SENSOTRACH® DUO ALU	9,0 x 9,8 cm	10	30662
SENSOTRACH® DUO ALU SLIT	9,0 x 9,8 cm	10	30663
SENSOTRACH® 3-PLUS	9,0 x 9,8 cm	10	30770
SENSOTRACH® 3-PLUS SLIT	9,0 x 9,8 cm	10	30780

