


SENSOTRACH®

REF 30520




REF 30609

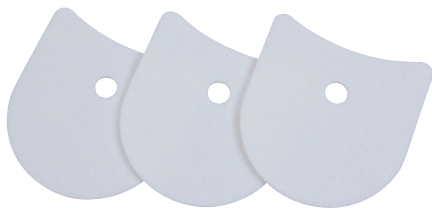

REF 30662



REF 30780

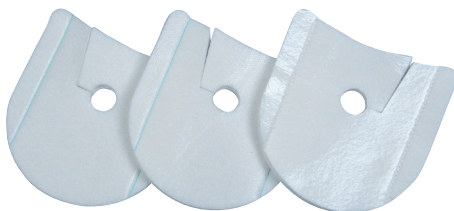

- ▶ Trachealkompressen hoher Qualität, mit anatomisch angepasster Abrundung für optimalen Tragekomfort
- ▶ Die **UNO** Varianten sind einschichtig, für Patienten mit geringer Sekretion
- ▶ Die **DUO** Varianten haben zwei Schichten, für Patienten mit mäßiger bis geringer Sekretproduktion: die hautnahe Schicht – durch einen grünen Streifen gekennzeichnet – absorbiert das Sekret effizient und leitet es nach außen in die periphere Schicht ab. Dadurch bleibt die Haut trocken und warm
- ▶ Die **3-PLUS** Varianten sind dreischichtig, für Patienten mit normaler bis starker Sekretion: die hautnahe Schicht absorbiert das Sekret effektiv und leitet es nach außen in die zentrale und in die periphere Schicht. Dadurch bleibt die Haut trocken und warm. Die äußere Schicht hat eine feuchtigkeitsabweisende Auflage, um die Kleidung zu schützen
- ▶ Die **DUO ALU** Komresse ist eine hochwertige, besonders saugfähige und formstabile Trachealkomresse, die einseitig eine aluminiumbedampfte Beschichtung aufweist. Die metallicfarbene Beschichtung verhindert ein Verkleben mit Blut und Sekretresten auf der Haut.
- ▶ Standardvarianten ohne Schlitz
- ▶ **SLIT** Varianten mit Schlitz zum schnellen Kompressen-Wechsel bei liegender Kanüle

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

SENSOTRACH® UNO REF 3052x
10 x Trachealkompressen

oder
SENSOTRACH® DUO REF 3060x
10 x Trachealkompressen

oder
SENSOTRACH® DUO ALU REF 3066x
10 x Trachealkompressen

oder
SENSOTRACH® 3-PLUS REF 307xx
10 x Trachealkompressen

Produkt	Größe	VE	REF
SENSOTRACH® UNO	9,0 x 9,8 cm	10	30520
SENSOTRACH® UNO SLIT	9,0 x 9,8 cm	10	30521
SENSOTRACH® DUO	9,0 x 9,8 cm	10	30608
SENSOTRACH® DUO SLIT	9,0 x 9,8 cm	10	30609
SENSOTRACH® DUO ALU	9,0 x 9,8 cm	10	30662
SENSOTRACH® DUO ALU SLIT	9,0 x 9,8 cm	10	30663
SENSOTRACH® 3-PLUS	9,0 x 9,8 cm	10	30770
SENSOTRACH® 3-PLUS SLIT	9,0 x 9,8 cm	10	30780

