


# TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric

REF 68000



REF 60700 (optioneel)

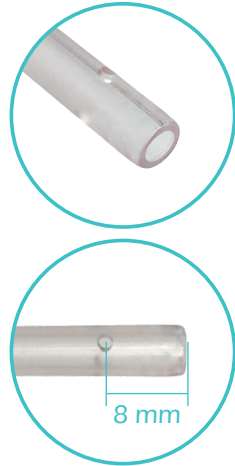

- ▶ Stoma-katheter voor het behoedzaam afzuigen van tracheasecreet
- ▶ Van zachte, flexibele en transparante kunststof
- ▶ Met centrale opening en vier openingen aan de zijkant ("ogen") van de katheterpunt, om te verhinderen dat de katheter zich tijdens het afzuigen vastzuigt aan de tracheawand
- ▶ Een schaalverdeling met afstanden van 1 cm biedt directe controle over de inbrengdiepte van de afzuigkatheter
- ▶ Groot assortiment (CH 06 - 18)
- ▶ Connectors met kleurcodering
- ▶ Twee verschillende lengtes verkrijgbaar: 25 cm en 50 cm (de korte versie is bijzonder geschikt voor tracheale afzuiging)
- ▶ Te gebruiken in combinatie met de TRACHFLOW® vingertip, om de afzuigkracht te reguleren. Door middel van de TRACHFLOW® vingertip wordt de afzuiglang van het afzuigapparaat verbonden met de steriele stoma-katheter. Dankzij de conische constructie past één maat op alle maten van de stoma-katheter

## LEVEROMVANG


**TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER  
Soft Metric S** REF 68100  
1 x Afzuigkatheter, steriel

of  
**TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER  
Soft Metric L** REF 68000  
1 x Afzuigkatheter, steriel

Bij bestelling de maat aangeven!

Optioneel verkrijgbaar:  
**TRACHFLOW® FINGERTIP** REF 60700  
(unsteriel)

## INFORMATION

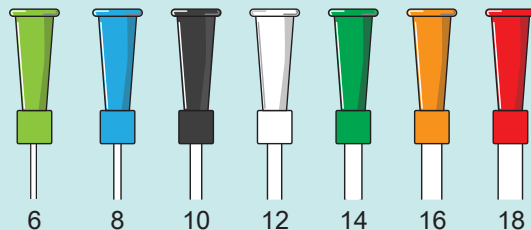

CE 0044 **STERILE EO** (geldt niet voor REF 60700)

Product	Maat	Lengte	Shore	PU	REF
TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric S	CH 06-18	25 cm	A70	30	<b>68100-xx</b>
TRACHEOSTOMA SUCTION CATHETER Soft Metric L	CH 06-18	50 cm	A70	30	<b>68000-xx</b>