

TRACHFLOW® METRIC S + L

stérile

REF 68630/68730



REF 60700



- ▶ Sonde stomique atraumatique pour l'aspiration en douceur de sécrétions trachéales
- ▶ Avec pointe arrondie pour prévenir les lésions de la trachée
- ▶ En plastique souple, flexible et transparent
- ▶ Avec orifice central et quatre orifices latéraux à l'extrémité du cathéter pour prévenir l'effet ventouse du cathéter exercé sur la paroi trachéale au cours de la procédure d'aspiration
- ▶ Une graduation à intervalles de 1 cm permet le contrôle direct de la profondeur d'introduction du cathéter d'aspiration
- ▶ Large assortiment (CH 10-16)
- ▶ Connecteurs à codage couleur
- ▶ Deux variantes de longueur : 25 cm et 50 cm
- ▶ La variante courte convient tout particulièrement à l'aspiration trachéale
- ▶ À utiliser avec le cône presse-doigt TRACHFLOW® pour contrôler la puissance d'aspiration. La tubulure d'aspiration de l'aspirateur est reliée à la sonde stomique stérile au moyen du cône presse-doigt TRACHFLOW®
- ▶ De par sa construction conique, une taille du cône presse-doigt TRACHFLOW® convient à toutes les tailles de sonde stomique

CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

TRACHFLOW® METRIC S **REF 68630**

1 x Sonde stomatale stérile et atraumatique

ou


TRACHFLOW® METRIC L **REF 68730**

1 x Sonde stomatale stérile et atraumatique

Accessoires optionnels:

TRACHFLOW® FINGERTIP **REF 60700**

INFORMATION

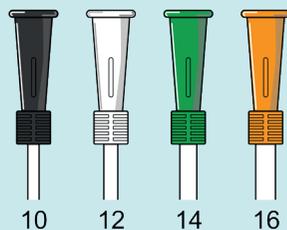

Les articles	Taille	Longueur	Shore	Couleur	Unité	REF
TRACHFLOW® METRIC S	CH 10	25 cm	A64		30	68630-10
TRACHFLOW® METRIC S	CH 12	25 cm	A64		30	68630-12
TRACHFLOW® METRIC S	CH 14	25 cm	A64		30	68630-14
TRACHFLOW® METRIC S	CH 16	25 cm	A64		30	68630-16
TRACHFLOW® METRIC L	CH 10	50 cm	A64		30	68730-10
TRACHFLOW® METRIC L	CH 12	50 cm	A64		30	68730-12
TRACHFLOW® METRIC L	CH 14	50 cm	A64		30	68730-14
TRACHFLOW® METRIC L	CH 16	50 cm	A64		30	68730-16

CE 0482 STERILE EO